

● ESTERILIZACIÓN / Sterilization / Stérilisation

● AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR / Steam sterilizers / Autoclaves à vapeur d'eau

SERIE AE (CON SECADO / With drying / Avec séchage)



SONDA CORAZÓN
/ Heart probe / Sonde flexible

Ventajas

- Modo agar (40 a 80 °C).
- Sonda corazón (opcional).
- Puesta en marcha programable (24 horas).
- Conexión a PC.
- Software de control (opcional).
- Impresora integrada o externa (opcional).

Advantages

- Agar mode (40 to 80 °C).
- Heart probe (optional).
- Programmable auto-start (24 h).
- Connection to PC.
- Control software (optional).
- External or integrated printer (optional).

Avantages

- Mode agar (40 - 80 °C).
- Sonde flexible (optionnelle).
- Démarrage programmable (24 h).
- Connexion à PC.
- Logiciel de contrôle (optionnel).
- Imprimante intégrée ou externe (optionnelle).

Aplicaciones

- **Indicado para esterilizar:** material sólido sin embolsar, material sólido embolsado, pequeños elementos porosos y elementos huecos tipo B (cavidades poco profundas y anchas), vidrio, plástico, elementos metálicos, bolsas de desecho, etc.

Intended use

- **Suitable to sterilize:** unwrapped and wrapped solids, small porous objects and hollow ware type B (slightly deep and broad cavities), glass, plastic, liquids, metallic objects, waste bags.

Applications


- **Utilisés pour la stérilisation de :** matériel solide emballé et non emballé, matériel poreux type B (des cavités légèrement profondes et larges), verre, liquides, plastique, objets métalliques, sacs de déchets, etc.



AE-75 DRY

Gráfica ciclo esterilización

/ Sterilization cycle graph / Courbe de stérilisation

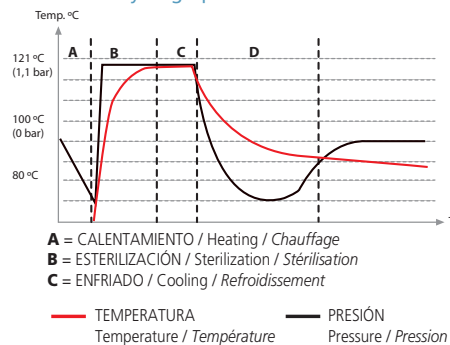

ACCESORIOS: VER PÁGINA 36 / Accessories: See page 36 / Accessoires : Voir page 36

Características

- Mueble exterior, encimera, depósito, tapa y cierre en acero inoxidable AISI-304.
- Control total por microprocesador: diez programas de esterilización, seis libres programables por el usuario.
- Depósito de agua para la alimentación del autoclave. Llenado automático de la cámara de esterilización.
- Incorpora conexión RS232 para conectar a un ordenador o una impresora.
- Incorpora orificio en el depósito para introducir sondas para la validación.
- Se suministra con gradilla perforada protectora de la resistencia.

Features

- External case, top, chamber and lid made of AISI-304 stainless steel.
- Total control by microprocessor: ten sterilization programs. Six programs are user free.
- Feeding water reservoir. Automatic water filling.
- Includes RS232 port to connect a printer or to a PC.
- It includes inlet in chamber for an external validation probe.
- Supplied with protecting grid for the heaters.

Caractéristiques

- Meuble extérieur, partie supérieure, cuve et couvercle en acier inoxydable AISI-304.
- Contrôlé par microprocesseur: dix programmes de stérilisation. six programmes libres pour l'utilisateur.
- Réservoir d'eau pour l'alimentation. Remplissage automatique de la chambre de stérilisation.
- Port de connexion RS232 pour imprimante ou PC.
- Orifice avec couvercle pour l'introduction des sondes pour validation ou calibration de l'autoclave.
- Fournit avec grille de protection de la résistance.

Seguridad

- Válvula y termostato de seguridad.
- Dispositivo hidráulico antiapertura de la puerta.
- Presostato de seguridad.
- Sensor de puerta abierta.

Safety

- Safety valve and thermostat.
- Hydraulic door blocking system while existing positive pressure in the chamber.
- Safety pressure switch.
- Open lid sensor.

Sécurité

- Soupape et thermostat de sécurité.
- Dispositif hydraulique empêchant l'ouverture du couvercle tant que la chambre est sous pression.
- Interrupteur niveau de sécurité.
- Capteur de couvercle ouvert.

REFERENCIA Reference Référence	CAPACIDAD Capacity Capacité	CAPACIDAD ÚTIL Useful capacity Capacité utile	Ø x H cm	H x A x F cm H x W x D cm H x L x P cm	TEMP. °C	PRESIÓN MÁXIMA bar Max. pressure bar Pression max. bar	W	kg	TIEMPO min. Time min. Temps min.	DEPÓSITO H ₂ O l Container H ₂ O l Réservoir H ₂ O l
AE-28 DRY	33	28	30 x 40	101 x 51 x 56	100-139	2,5	2000	60	3-180	7
AE-75 DRY	79	75	40 x 60	109 x 62 x 73	100-139	2,5	3200	85	3-180	14
AE-110 DRY	115	110	40 x 85	133 x 63 x 73	100-139	2,5	4500	114	3-180	14
AE-150 DRY	175	150	50 x 75	131 x 76 x 85	100-139	2,5	6000	140	3-180	24

Los modelos AE-28 DRY y AE-75 DRY se suministran para corriente monofásica 230 V. Los modelos AE-110 DRY y AE-150 DRY se suministran para corriente trifásica 400 V (trifásico 230 V opcional).

Models AE-28 DRY and AE-75 DRY are supplied with 230 V mono-phase 230 V. Models AE-110 DRY and AE-150 DRY are supplied with 400 V tri-phase supply (tri-phase 230 V optional).

Les modèles AE-28 DRY et AE-75 DRY sont livrés pour courant monophasé 230 V. Les modèles AE-110 DRY et AE-150 DRY sont livrés pour courants triphasés 400 V (triphase 230 V optionnel).