



Autoclave CLINOCLAV AH-21 S2 DRY



AH-21 S2 DRY




Impresora opcional

Ventajas:

- Teclas de función
- Impresora externa (opcional).

Courbe stérilisation

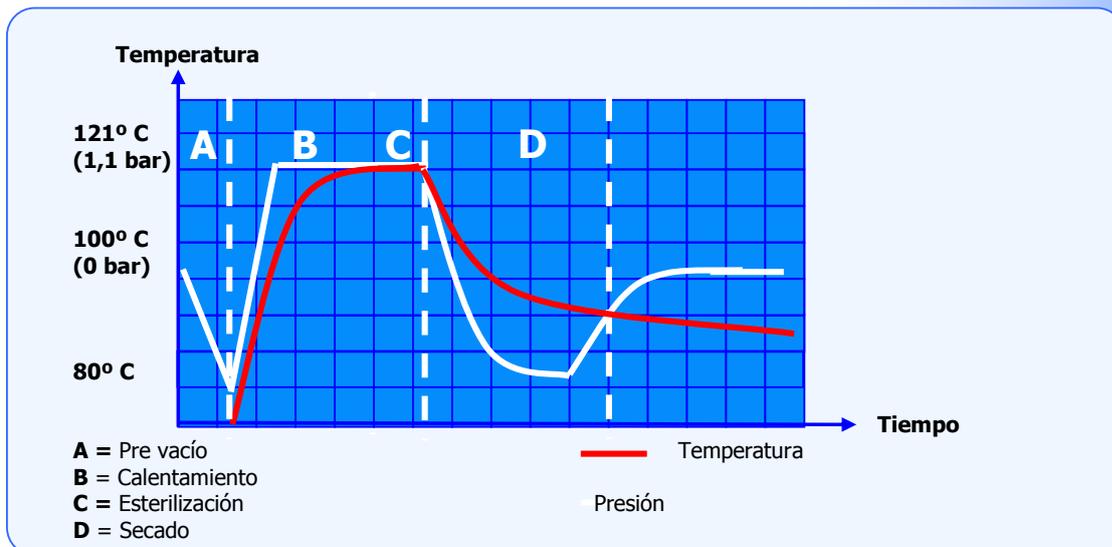

Autoclaves



Autoclave CLINOCLAV AH-21 S2 DRY

Aplicaciones:

Indicado para esterilizar: Material sólido sin embolsar, material sólido embolsado, pequeños elementos porosos, y elementos huecos tipo B (cavidades poco profundas y anchas. Vidrio, plástico, líquidos, elementos metálicos, bolsas de desecho, etc.

Características:

- Pre-vacío antes de la esterilización y secado con sistema de vacío.
- Control total por microprocesador
- Depósito de alimentación 4,5
- Llenado automático de la cámara de esterilización.
- Incorpora conexión RS-232 para conectar a impresora

Seguridad:

Válvula y termostato de seguridad.

Dispositivo hidráulico anti-apertura de la puerta.

Presostato de seguridad.

Microrruptor de puerta abierta que evita la ejecución de cualquier programa.

Suministrado con los accesorios siguientes:

- Un soporte para cuatro bandejas
- Tres bandejas perforadas en acero inoxidable: Ref. BAH-21
- Una pinza para extraer bandejas
- Un tubo flexible con conector para vaciar el depósito de condensados
- Soporte porta bolsas
- Bandeja auxiliar



Referencia	Capacidad	Ø x H.	H x A x F en cm	Temp. °C	Max. bar	Potencia W	Peso Kg.	Rango de tiempo
AH-21 S2 DRY	21 L	25 x 43 cm	42,5 x 59 x 68	100-135	2,2	2.000	55	3 a 180 min.



Autoclave Clinoclav AH-21 S2 DRY Accesorios

Impresora de sobremesa

Impresora de sobremesa
Imprime el nº de programa, nº de ciclo,
temperatura, tiempo fecha y hora de cada
esterilización. Mensajes de error quedan asimismo
reflejados. **Referencia: ITS**



Cinta de control de esterilización

Rollo de cinta de control de esterilización.

Referencia: TEST-CT



Autoclaves