



Autoclave AHS-75 DRY



Sonda "corazón"



Software




Impresora opcional

AHS-75 DRY

Ventajas:

- Modo agar (40-80° C)
- Sonda corazón (opcional)
- Conexión a PC (US)
- Puesta en marcha programable (24 h)
- Software de control (opcional)
- Secado automático

Gráfica de esterilización

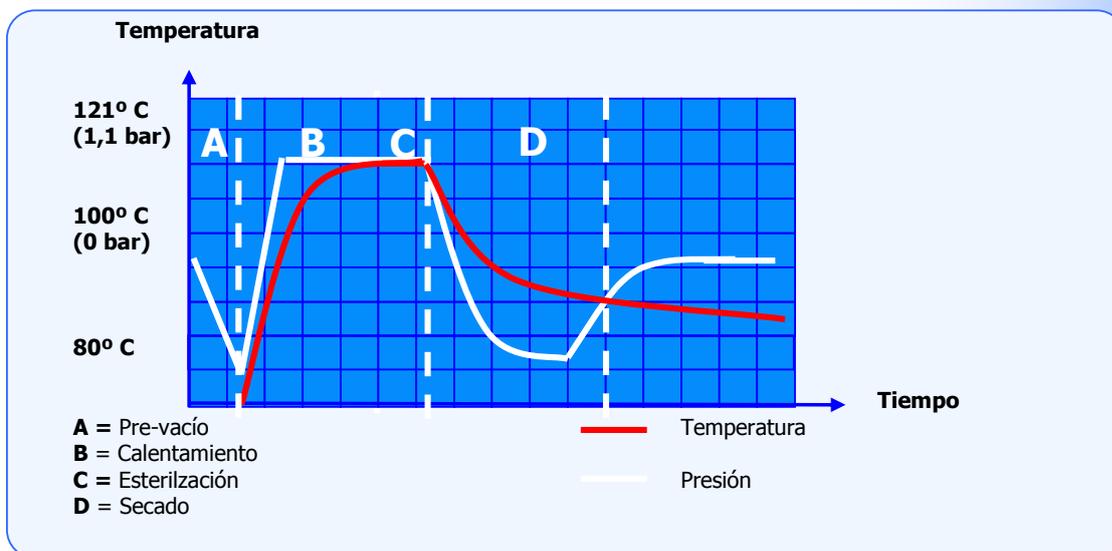

Autoclaves



Autoclave AHS-75 DRY

Aplicaciones:

Indicado para esterilizar: material sólido sin embolsar, material sólido embolsado, pequeños elementos porosos y elementos huecos tipo B (cavidades poco profundas y anchas, vidrio, plásticos, elementos metálicos, bolsas de desecho, etc.

Características:

Depósito, tapa y cierre en acero inoxidable AISI-304
Control total por microprocesador: Diez programas de esterilización, seis libres programables por el usuario.
Depósito de agua para la alimentación del autoclave de 20 litros.
Llenado automático de la cámara de esterilización.
Secado automático
Incorpora conexión RS-232 para conectar a un ordenador o una impresora.

Seguridad:

Válvula y termostato de seguridad.
Dispositivo hidráulico anti-apertura de la puerta.
Presostato de seguridad

Se suministra completo con los accesorios:

Un soporte para cinco bandejas
Dos bandejas perforadas en acero inoxidable **Ref. BAH-75**
Bandeja auxiliar



Referencia	Capacidad	Ø x H.	H x A x F en cm	Temp. °C	Max. bar	Potencia W	Peso Kg.	Rango tiempo
AHS-75 DRY	75 L	40 x 60 cm	63 x 76 x 83	100-135	3,2	3.200	85	3 a 180 min.

Autoclaves



Autoclave AHS-75 DRY Accesorios

Impresora de sobremesa

Impresora de sobremesa
Imprime el nº de programa, nº de ciclo,
temperatura, tiempo fecha y hora de cada
esterilización. Mensajes de error quedan asimismo
reflejados. **Referencia: ITS**



Sonda "corazón" PT-100

Recomendada para esterilizaciones de líquidos en frascos
de 1 L o más.
El control se efectúa desde el microprocesador.
Este accesorio debe de ser instalado en fábrica.

Referencia: PT-2




Kit conexión PC vía RS232

Equipo para la conexión y el correcto funcionamiento
del software de comunicación entre el equipo y el PC.

Incluye: Convertidor USB-RS232 hembra con CD con
los drivers

Cable macho-macho DB-9 para conectar convertidor
con nuestro equipo

Referencia: SOFT-RS232

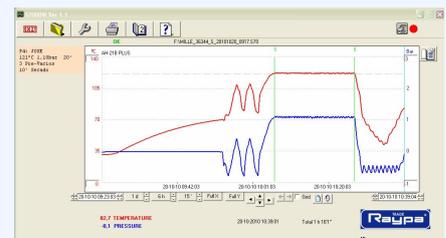



Autoclave AHS-75 DRY
Accesorios

Cinta de control de esterilización

Rollo de cinta de control de esterilización.

Referencia: TEST-CT



Autoclaves