



Autoclave AHS-75 N



Sonda "corazón"




Impresora opcional

AHS-75 N

Ventajas:

- Modo agar (40-80° C)
- Sonda corazón (opcional)
- Conexión a PC
- Puesta en marcha programable (24 h)
- Software de control (opcional)

Gráfica de esterilización

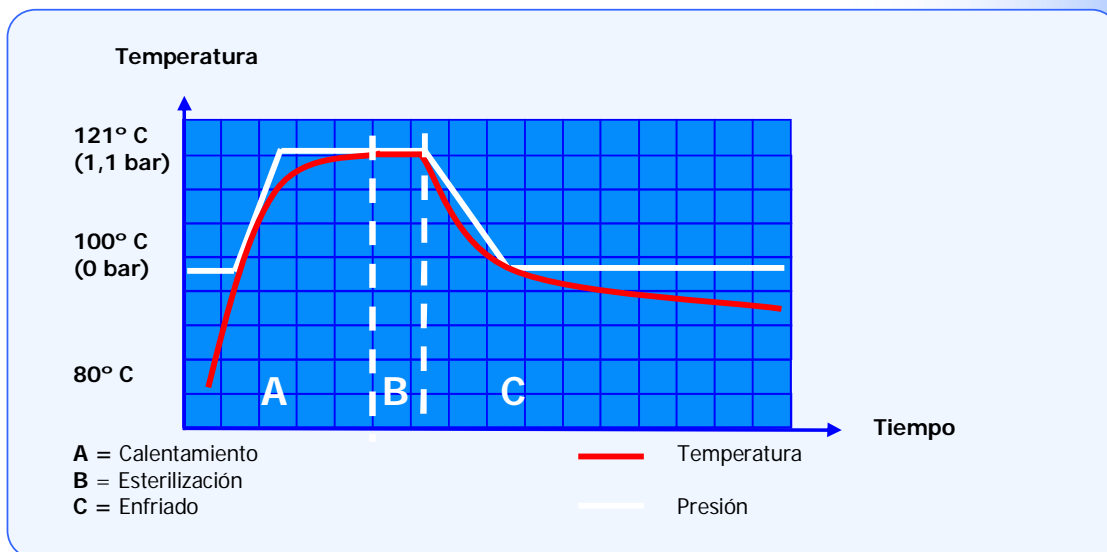

Autoclaves



Autoclave AHS-75 N

Aplicaciones:

Indicado para esterilizar: medios de cultivo, vidrio, líquidos, plásticos, elementos metálicos, bolsas de desecho, etc.

Características:

Depósito, tapa y cierre en acero inoxidable AISI-304
Control total por microprocesador: diez programas esterilización, seis libres programables por el usuario.
Incorpora conexión RS-232 para conectar a un ordenador o una impresora.
Pulsador de desvaporización. Válvula manual de drenaje.
Depósito para la alimentación del autoclave de 7 L
Llenado manual de la cámara de esterilización (3 litros aprox.)

Seguridad:

Válvula y termostato de seguridad.
Dispositivo hidráulico anti-apertura de la puerta.

Se suministra completo con los accesorios:

Un soporte para cinco bandejas
Dos bandejas perforadas en acero inoxidable Ref. BAH-75
Bandeja auxiliar



Referencia	Capacidad	Ø x H.	H x A x F en cm	Temp. °C	Max. bar	Potencia W	Peso Kg.	Rango tiempo
AHS-75 N	75 L	40 x 60 cm	63 x 76 x 83	100-135	3,2	3.200	85	3 a 180 min.

Autoclaves



Autoclave AHS-75 N Accesorios

Impresora de sobremesa

Impresora de sobremesa
Imprime el nº de programa, nº de ciclo, temperatura, tiempo fecha y hora de cada esterilización. Mensajes de error quedan asimismo reflejados. **Referencia: ITS**



Sonda "corazón" PT-100

Recomendada para esterilizaciones de líquidos en frascos de 1 L o más.
El control se efectúa desde el microprocesador.
Este accesorio debe de ser instalado en fábrica.




Referencia: PT-2

Kit conexión PC vía RS232

Equipo para la conexión y el correcto funcionamiento del software de comunicación entre el equipo y el PC.

Incluye: Convertidor USB-RS232 hembra con CD con los drivers
Cable macho-macho DB-9 para conectar convertidor con nuestro equipo

Referencia: SOFT-RS232

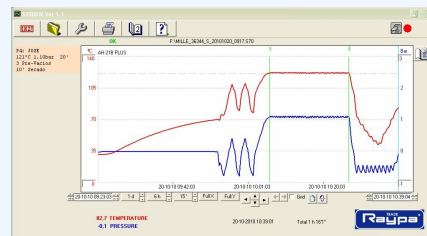



Autoclave AHS-75 N
Accesorios

Cinta de control de esterilización

Rollo de cinta de control de esterilización.

Referencia: TEST-CT



Autoclaves